

Manual

VISUALIZAÇÃO – EXAME DE IMAGEM

Apresentação

O resultado de exame de imagem, pode ser visualizado de duas formas.

- 1- Através do programa **prontuário eletrônico** na aba **resultados de exames**, após seguir esse procedimento, o ícone do link para visualização de imagem ficará disponível.

PRONTUARIO ELETRONICO

Boletim de Atendimento: 2519373

Pulseira: 201638680255

Prontuário: 715605

Sexo: Masculino

Peso:

Atendimentos Pendentes

Nome: PACIENTE TESTE

Idade: 57A 11M

Data de nascimento: 21/03/1964

Data de Entrada: 18/02/2022 09:23:31

Especialidade: CLINICO GERAL

Convênio: SUS

Alergias: NÃO INFORMOU.

Linha de Cuidado: SELECIONE

Procedimento: ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA.

Protocolo:

Dados anteriores

Resultados de exames

Histórico do Paciente

Atendimento

Anamnese / EF

Alergias

Dados complementares

CID10

Prescrição

Parecer médico

Procedimentos realizados

Recitativo

Atestado Médico

Fiscal

Decl. Comparecimento

Decl. Acompanhante

Anotações

Protocolos

ENFERMAGEM

SERVIÇO SOCIAL


COMUNICAÇÃO FAMILIAR- PÓS ALTA

EVOLUÇÃO ADMINISTRATIVA

PAPS

Histórico de Exames Do Prontuário

Exames de imagens

Data de Estudo	Descrição	Projeção	Qtde Fatias	Visualizar resultado
18/03/2022 17:31:34	ToraxAP		1	

- lembrando que o mesmo procedimento se repete para visualizar o ícone do link de exibição no programa **evolução do paciente interno** que fica disponível tanto na aba **imagem** ou pela aba **resultado de exames** que fica disponível dentro do sumário do paciente.

EVOLUÇÃO DE PACIENTE INTERNO

PACIENTE TESTE - M - 57 Ano(s) - kg - Prontuário: 715605 - Convênio: SUS

Voltar ao Painel de Leitos

Boletim de Atendimento: 2519373

Data de Entrada : 18/02/2022 09:23:31

Data Internação : 18/02/2022 10:33:42

Permanência na Unidade: 1m 11d 7h 31min

Profissional: MARLON ASSIS

Leito: CENTRO DE REABILITAÇÃO - 310.1

Clínica: CLINICO GERAL

Permanência no Leito: 1d 2h 8min

Alergias: NÃO INFORMOU.

Linha de Cuidado: SELECIONE

Sumário do paciente

Sistematização de Enfermagem

Apache II

Evolução

Exames

Imagem

Diagnóstico


Protocolos

Prescrição

Parecer médico

Procedimentos realizados

Exames de imagens

Data de Estudo	Descrição	Projeção	Qtde Fatias	Visualizar resultado
18/03/2022 17:31:34	ToraxAP		1	




Ao clicar no ícone de exibição , o sistema abrirá o pop-up do sistema **Oviyam 2**.

Senha de acesso:

Usuário: medico

Senha: medico

OBS: Caso a senha esteja incorreta, acionar equipe de suporte disponível na unidade.

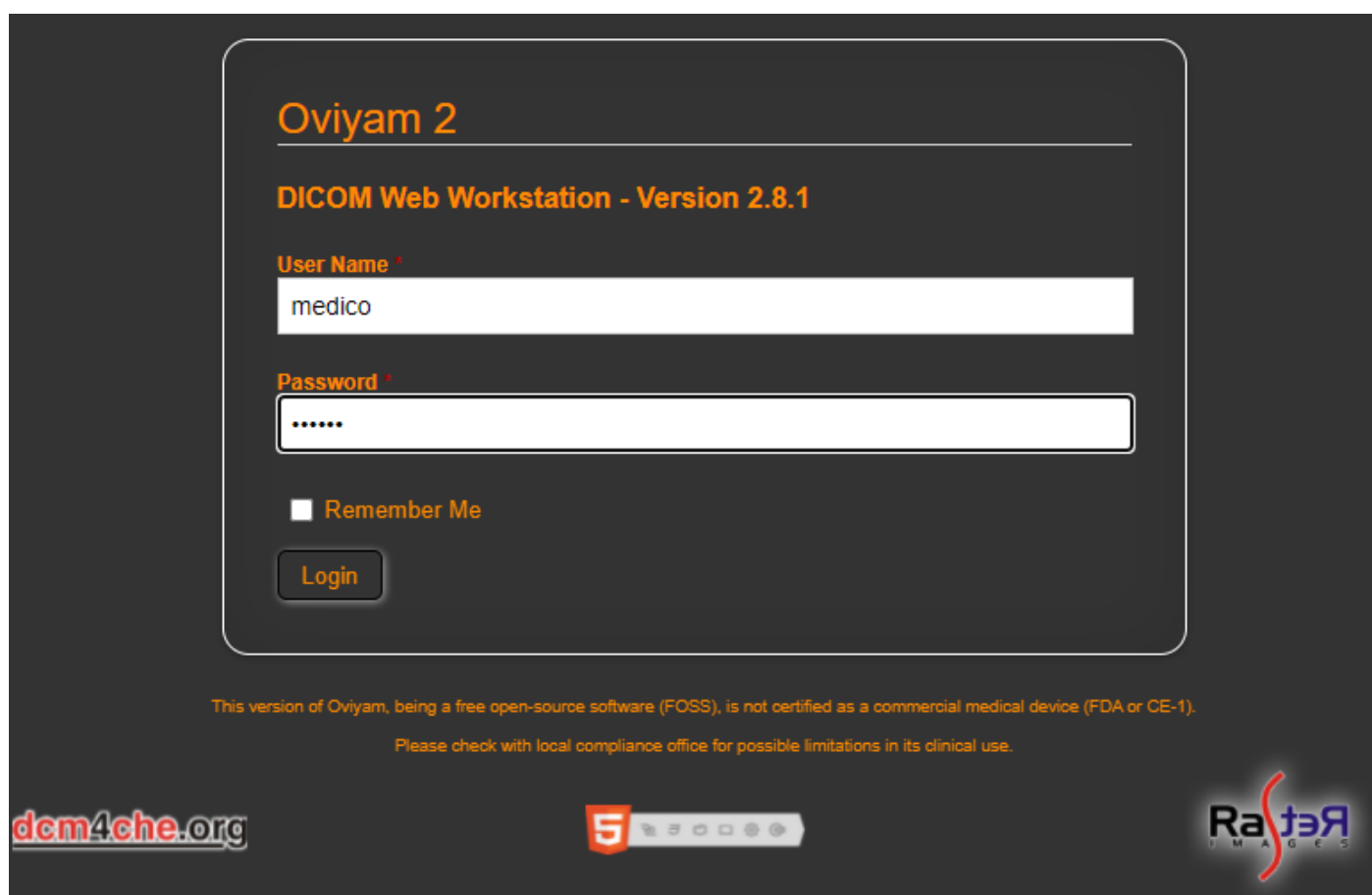

Oviyam 2

DICOM Web Workstation - Version 2.8.1

User Name *

medico

Password *

.....

☐ Remember Me

Login

This version of Oviyam, being a free open-source software (FOSS), is not certified as a commercial medical device (FDA or CE-1).
Please check with local compliance office for possible limitations in its clinical use.

dcm4che.org

5


Rastar
IMAGES

Manual

VISUALIZAÇÃO – EXAME DE IMAGEM

Apresentação

Após logar no sistema **Oviyam 2** com a senha informada no manual acima, o exame do paciente ficará disponível para a visualização, como a imagem abaixo:

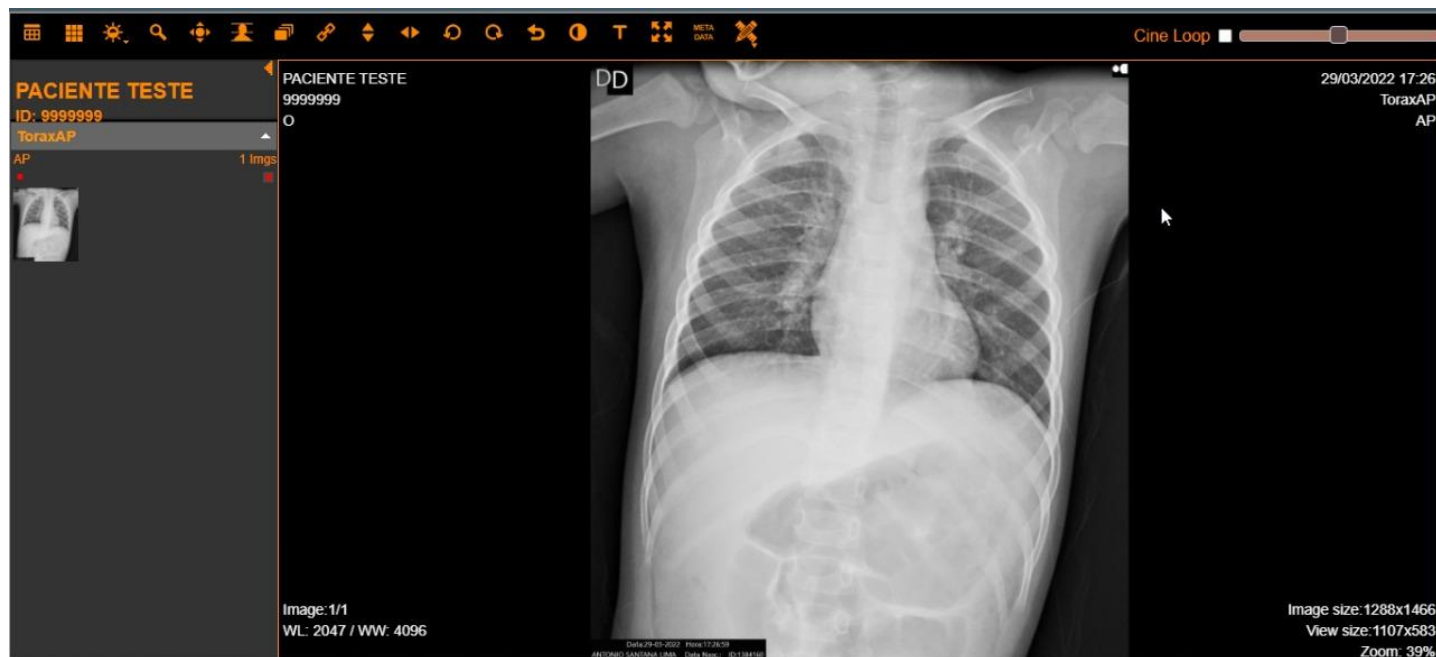

Manual

VISUALIZAÇÃO – EXAME DE IMAGEM

Apresentação

2 – A segunda forma de visualização é através do sistema **Oviyam 2**, onde o usuário terá acesso a todos os resultados de exames.



Oviyam 2

DICOM Web Workstation - Version 2.8.1

User Name *

medico

Password *

.....

☐ Remember Me

Login


This version of Oviyam, being a free open-source software (FOSS), is not certified as a commercial medical device (FDA or CE-1).
Please check with local compliance office for possible limitations in its clinical use.

dcm4che.org 5 RaS

Após logar no sistema **Oviyam 2**, o usuário de terá acesso a todos os filtros para a exibição de imagem, como: **IP Patient** (onde será informado o boletim do paciente), **patient name** (nome completo do paciente) e **Study Date (from ou To)** para filtrar a data que deseja visualizar o exame.

No **modality** o usuário terá a opção de filtrar a lista dos resultados dos exames por categoria, exemplo:

DX e CR = exames raio-x / **Today CT** = Consegue visualizar todos os exames realizados do dia.

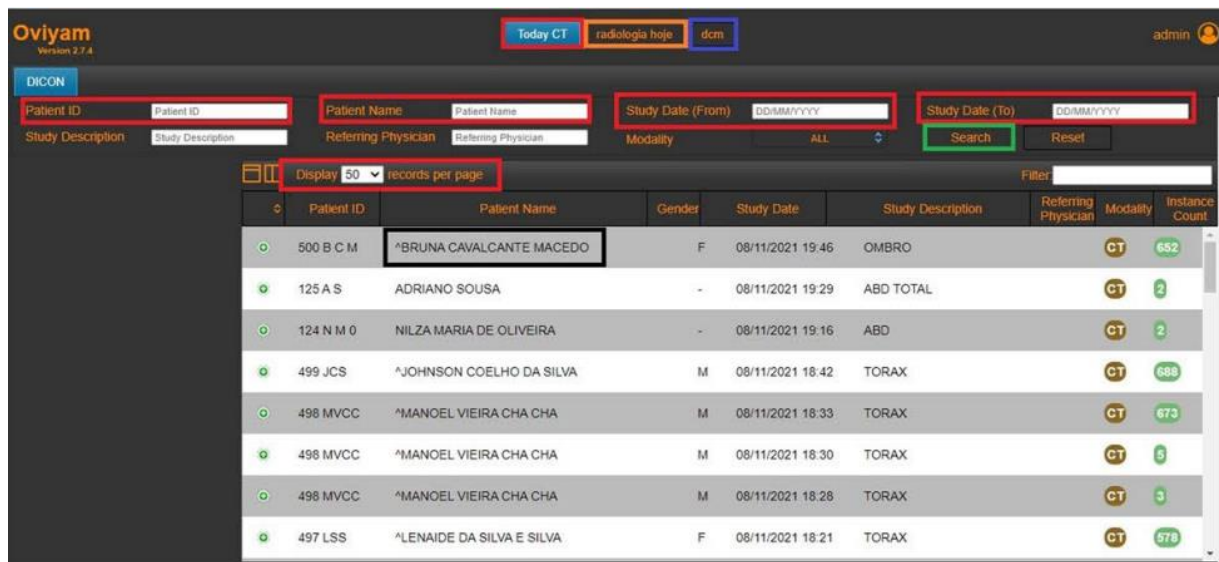

Oviyam
Version 2.7.4

Today CT radiologia hoje dcm admin

DICOM

Patient ID Patient ID Patient Name Patient Name Study Date (From) DD/MM/YYYY Study Date (To) DD/MM/YYYY

Study Description Study Description Referring Physician Referring Physician Modality ALL Search Reset

Display 50 records per page Filter

Patient ID	Patient Name	Gender	Study Date	Study Description	Referring Physician	Modality	Instance Count
500 B C M	*BRUNA CAVALCANTE MACEDO	F	08/11/2021 19:46	OMBRO		CT	652
125 A S	ADRIANO SOUSA	-	08/11/2021 19:29	ABD TOTAL		CT	2
124 N M 0	NILZA MARIA DE OLIVEIRA	-	08/11/2021 19:16	ABD		CT	2
499 JCS	*JOHNSON COELHO DA SILVA	M	08/11/2021 18:42	TORAX		CT	688
498 MVCC	*MANOEL VIEIRA CHA CHA	M	08/11/2021 18:33	TORAX		CT	673
498 MVCC	*MANOEL VIEIRA CHA CHA	M	08/11/2021 18:30	TORAX		CT	5
498 MVCC	*MANOEL VIEIRA CHA CHA	M	08/11/2021 18:28	TORAX		CT	3
497 LSS	*LENAIDE DA SILVA E SILVA	F	08/11/2021 18:21	TORAX		CT	578